



GREINER

WE DESIGN QUALITY



workstools

Arbeitsstühle Arbeitshocker Patientenstühle
work stools work chairs patient chairs

MADE IN GERMANY

Produktion



Entwicklung development



Produktion 1 production 1

Made by GREINER ist Made in Germany. Auf circa 16.000 m² beweisen wir täglich im schwäbischen Pleidelsheim, dass genau dies unser Erfolgskonzept ist. Computergestützte Automatisierung hat in unseren Hallen schon lange Tradition und ist mit ein Grund für den sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere sehr hohe Qualität in Design, Funktionalität und Technik, verbunden mit einer großen Flexibilität, die für die in vielen Arbeitsschritten hergestellte qualifizierte Handarbeit notwendig ist, macht uns zu einem Partner für anspruchsvolle und qualitätsbewusste Kunden.

Am Anfang steht die Vision - in unserer eigenen Entwicklungsabteilung werden stetig neue Produkte entwickelt, die mit ihrer Innovation, ihrer gestalterischen und funktionalen Qualität und ihrer Individualität Maßstäbe setzen. Bestätigt wird unsere gleichbleibend hohe Qualität durch ein unabhängig zertifiziertes Qualitätssicherungssystem - Greiner ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.



Schäumen foaming



Produktion 2 production 2




CNC Zuschneiden CNC cutting

production



CNC-Drehen CNC lathing

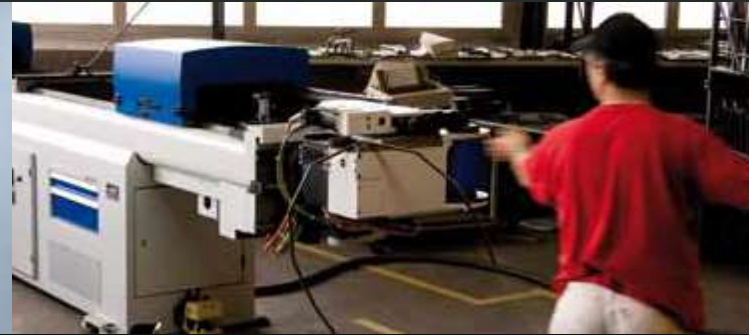

CNC-Biegen CNC bending



CNC-Schweißen CNC welding

Made by GREINER is Made in Germany. In the Swabian village of Pleidelsheim, on approximately 16,000 square metres, we daily prove that this is exactly our key to success. Computer aided automation has had a long tradition in our production halls and is also one reason for an extremely high quality standard. GREINER's outstanding quality in design, functionality and technology in combination with a great flexibility for integrating necessary handwork makes us a partner for demanding and quality-conscious customers.

In the beginning there is a vision. We continuously develop new products, thus creating standards with respect to innovation, design, individuality and functional quality. An independent, certified quality assurance system certifies our constant high quality. GREINER is certified according to DIN EN ISO 9001.



Nähen sewing



Polstern upholstery



Montage assembling

Arbeitshocker und Arbeitsstühle mit Fußauslösung with foot release

work stools and work chairs

Art.Nr. p/n
3045305



Art.Nr. p/n
4155305



Art.Nr. p/n
4105305



Die von GREINER entwickelte Fußauslösung bietet speziell in Bereichen, in denen mit sterilen oder verschmutzten Handschuhen gearbeitet wird, einen hohen funktionellen Wert. Die Auslösung erfolgt durch die Betätigung der über dem Kreuzfuß angebrachter runder Pedalplatte. Sie ist ringsum zu bedienen; der Fußring ist bei dieser Variante serienmäßig. Zwei verschiedene Verstellbereiche der Sitzhöhe können gewählt werden: 43-56 cm oder 51-71 cm. Alle workstools besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Alle Varianten sind auch in einer elektrisch leitenden Ausführung erhältlich.

GREINER developed a special foot release for these chairs and stools which has an astounding functional value when having to work with sterile or dirty gloves. Here the release is done by actuating the round disc which is situated on top of the base part. This disc can be actuated from all sides, the footring for these models comes as a standard. There are two different adjusting ranges for choice: 43-56 cm or 51-71 cm. All workstools are equipped with safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. All chairs and stools are also available in an electroconductive version.

Art.Nr. p/n
4125305



Optionen Options

Sitzpolster seat
ø 40 cm



Sitzpolster seat ø 40 cm
abgeschrägte Sitzkante
ergonomical shaped
seat edge



ohne
Rückenlehne
without
backrest

Rückenlehne
verstellbar
backrest
adjustable



Rückenlehne
ca. 180° drehbar
backrest swivable
by approx. 180°

Fußkreuz five star base
mit Fußauslösung
with foot release



Sitzhöhen seat height
43-56 cm
51-71 cm

Die Sitzpolster bei den Arbeitshockern und -stühlen mit Fußauslösung haben einen Durchmesser von 40 cm. Als weitere Variante gibt es die Möglichkeit, ein Sitzpolster mit anatomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich zu wählen. Dies dient einer spürbaren Druckentlastung der Oberschenkel. Außerdem gibt es unterschiedliche Rückenlehnen zur Auswahl.

The seats of the workstools and chairs with foot release have a diameter of 40 cm. As an alternative you can also get a seat with an anatomically shaped conical design in the front part. This shape automatically helps taking away pressure from the surgeon's thighs. You may choose from different backrests for these GREINER chairs.

Arbeitshocker und Arbeitsstühle work stools and work chairs mit Handauslösung with hand release

Drei unterschiedliche Verstellbereiche der Sitzhöhe können zur Anpassung an die Körpergröße und / oder an die Arbeitshöhe gewählt werden: 42-54 cm, 46-58 cm und 54-73 cm. Ausgelöst wird die Verstellung der Gasdruckfeder über einen Hebel zur Handauslösung unter der Sitzfläche. Auch diese Varianten besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Der verchromte, massive Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine ist ebenso wie die elektrisch leitende Ausführung bei allen Varianten erhältlich. Sitzpolster sind in rund (ø 36 cm oder 40 cm) oder mit ergonomisch ab-geschrägter Sitzkante im vorderen Bereich (ø 40 cm) erhältlich. Außerdem gibt es unterschiedliche Rückenlehnen zur Auswahl.

There are three different adjusting ranges for the seat height so that it can be adjusted according to different sizes and / or heights for working: 42-54 cm, 46-58 cm and 54-73 cm. The seat can be adjusted with the help of a gas spring which is operated by a hand lever under the seat. These chairs, too, have safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. The massive, chrome-plated footring avoids a sagging of the legs. These chairs are also available in an electroconductive version. The seats are available either with round design (ø 36 cm or 40 cm) or with an ergonomically shaped design (ø 40 cm). You may choose between different backrests for these GREINER chairs.



Art.Nr. p/n
3044105



Art.Nr. p/n
3004205



Optionen Options

Sitzpolster seat ø 36 cm



Fußkreuz five star base


ohne Fußring mit Fußring
with foot ring without foot ring



Sitzpolster seat ø 40 cm



Sitzpolster seat ø 40 cm
abgeschrägte Sitzkante
ergonomical shaped
seat edge

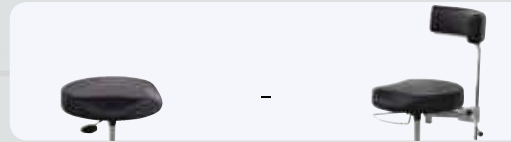

Sitzhöhen seat height

43-55 cm
47-59 cm
54-73 cm

47-59 cm
54-73 cm

mit Handauslösung
with hand release

ohne Rückenlehne
without backrest

Rückenlehne verstellbar
backrest adjustable

Rückenlehne ca. 180° drehbar
backrest swivable by approx. 180°

Art.Nr. p/n
3046105

Art.Nr. p/n
4185005

Art.Nr. p/n
4124105

Art.Nr. p/n
4125005



Arbeitshocker und Arbeitsstühle mit hydraulischer Pumpsäule work stools and work chairs with hydraulically adjustable column

Arbeitshocker und -stühle mit hydraulischer Sitzhöhenverstellung sind über einen Pumphebel 19 cm in der Höhe zu verstellen. Alle Modelle sind mit einer zentralen Bremse ausgestattet. Das Sitzpolster hat einen Durchmesser von 40 cm. Die Rückenlehne des Arbeitsstuhles ist in der Höhe und in der Tiefe verstellbar.
work stools and -chairs with hydraulic seat height adjustment must be adjusted via a pumping lever. The height adjustment range is 19 cm. All models are equipped with a central brake. The seat cushion has a diameter of 40 cm. The backrest of the work chair is adjustable in height and in depth.



Art.Nr. p/n
3047700



Art.Nr. p/n
3007700

Patienten und Blutabnahmestühle patient chairs and chairs for phlebotomy


serie 22, der GREINER-Patientenstuhl hat eine hydraulische Pumpsäule mit einer runden Bodenplatte, oder mit einem polierten Fußkreuz – wahlweise mit Bodengleitern oder Doppelrollen (ø 50 mm) und Zentralfeststeller. Der Stuhl hat eine starre oder eine bewegliche Rückenlehne und kann mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze ausgestattet werden. Als Blutabnahmestuhl hat er links und rechts eine Halterung für die vielseitig verstellbare Blutabnahme-Armauflage. Eine zweite Blutabnahme-Armauflage kann optional bestellt werden.



Art.Nr. p/n
2227640



Art.Nr. p/n
2227340

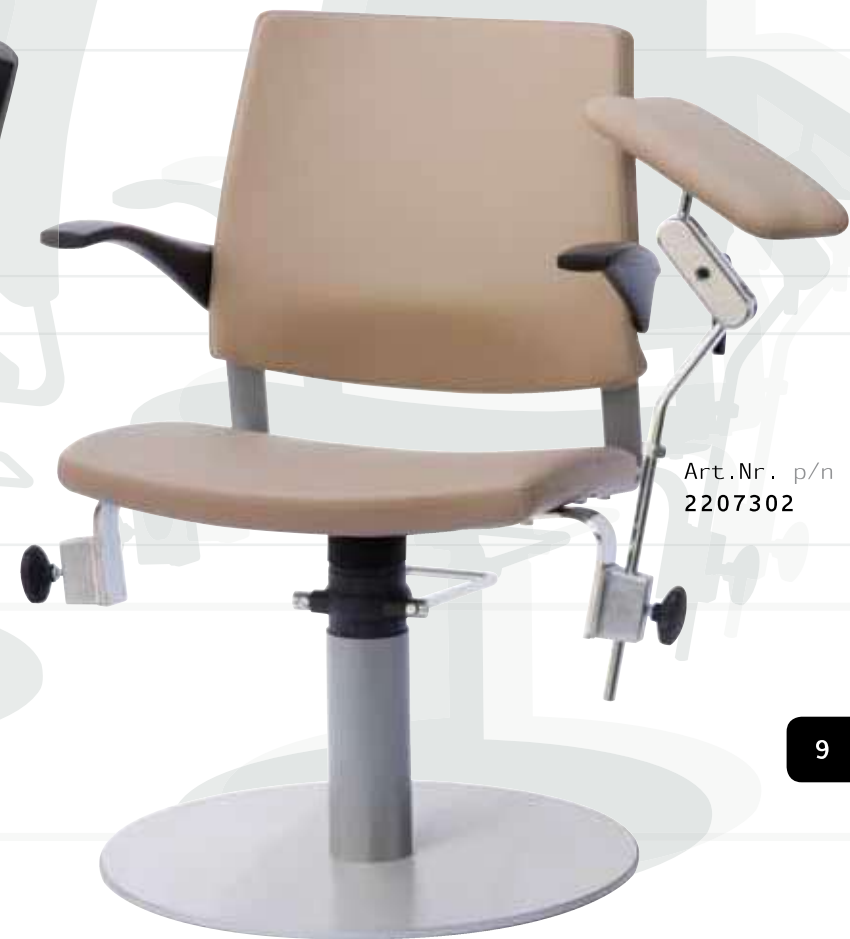

Art.Nr. p/n
2207302

Chairs of GREINER's **serie 22** have a hydraulical pump with a round base plate or a polished five star base – either with sliding pads or double castors (ø 50 mm) and central brake. The chair has a fixed or tiltable backrest and can be equipped with a headrest that can be adjusted in height. The blood withdrawal version has a holder on the right and left side where the versatile adjustable armrest can be put in. If required, a second blood withdrawal armrest can be ordered in addition.

workstools

Arbeits- und Bürostühle, Operationsstühle
work and office chairs, surgery chairs

Art.Nr. p/n
3054400



Art.Nr. p/n
3064400



Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe und Tiefe verstellbar. Die Sitzfläche besitzt einen zuschaltbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Die Höhenverstellung, wahlweise 42-54 cm oder 46-58 cm erfolgt durch eine Handauslösung unter der Sitzfläche. Der Stuhl ist je nach Variante mit oder ohne Armlehnen erhältlich.

The backrest with attenuation function can be adjusted in height and depth. The seat can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The height adjustment of either 42-54 cm or 46-58 cm can be done with the help of a hand release, situated under the seat. This chair is available with or without armrests.

Als Operationsstuhl ist die Serie 309 auf die speziellen Anforderungen im Operationssaal ausgelegt. Die Stühle dieser Baureihe verfügen über vielfältig verstellbare Armauflagen die den Schulterbereich, die Nackenmuskulatur und die Bandscheiben des Operierenden entlasten. Die Auflagepolster können seitlich um 9 cm und ca. 40° nach hinten, sowie ca. 45° nach vorn geschwenkt werden. Sie können auch in der Höhe um 17 cm verstellt und 360° um die eigene Achse gedreht werden. Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe um 9 cm verstellbar. Die Sitzfläche besitzt einen zuschaltbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Der Stuhl ist elektrisch leitfähig. Die Höhenverstellung erfolgt wahlweise durch eine Fußauslösung oder durch eine Handauslösung unter der Sitzfläche.

Art.Nr. p/n
3095305




Art.Nr. p/n
3094700



11

Chairs of series 309 were especially developed for the use in operating theatres. These chairs come with manifold adjustably armrests which support the relief of the shoulders, neck muscles and spinal discs of the surgeon. The polsters can be adjusted sideways by 9 cm and by approximately 40° backwards as well as by 45° forwards. They can also be adjusted in height by 17 cm and rotate by 360°. The backrest which has a cushioning effect can be adjusted in height by 9 cm. The seat can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The chair is electroconductive. The height adjustment is either done by a foot release or by a hand release which is situated under the seat.

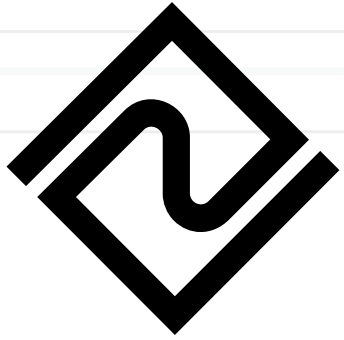

GREINER

WE DESIGN QUALITY

GREINER GmbH

Riedbachstraße 5

74385 Pleidelsheim

Phone +49-7144-8112-0

Fax +49-7144-8112-99

info@greiner-gmbh.de

www.greiner-gmbh.de

GREINER Middle East DMCC

DMCC Business Center, Almas Tower

Jumeirah Lakes Towers

P.O.Box 340505

Sheikh Zayed Road

Dubai U.A.E

Phone: +971 4 3608011

www.greiner-me.com

info@greiner-me.com

MADE IN GERMANY