

ENDOTRON®532
MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

BESTELLUNG

endoTRON®532G-61100

NOTWENDIGES ZUBEHÖR STAND-ALONE-MODUS

FußschalterG-61101

FernbedienungG-61102

NOTWENDIGES ZUBEHÖR KOMBI-MODUS

Trittschutz für megaTRON 54^{HPS}G-61107

DatenkabelG-61108

NOTWENDIGES ZUBEHÖR STAND-ALONE- / KOMBI-MODUS

Bitte sprechen Sie Ihren GEUDER-Mitarbeiter im Außendienst
auf den geeigneten Mikroskopfilter an.

OPTIONAL

FußschalterG-61101

FernbedienungG-61102

SchutzbrilleG-61104

FB-SpannungsversorgungG-61105

Trittschutz für megaTRON 54^{HPS}G-61107

DatenkabelG-61108

ErsatzschlüsselG-61109

SL-Adapter Torney SL-6000G-61301

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN
GEUDER-ANSPRECHPARTNER.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen (L x B x H)350 x 260 x 155 mm

Gewichtmax. 8 kg

ANSCHLUSSWERTE

Spannung..... 100 - 230 V

Netzfrequenz.....50/60 Hz

Leistungsaufnahme..... max. 500 W

LASERMODUL

Wellenlänge 532 nm

Leistung 50 – 1.500 mW

Pilotstrahl.....Diode < 1 mW

Wellenlängeca. 635 nm

FERNBEDIENUNG

Display.....5,5 Zoll Farb-Touchscreen

Spannung..... 100 - 230 V

Netzfrequenz..... 50/60 Hz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur 10 – 35°C

Luftfeuchte..... 10% - 90% r.H.

ENDOTRON®532
MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

INTEGRIERTE BENUTZERFÜHRUNG ODER STAND-ALONE.



endoTRON®532

Geuder®
Precision made in Germany

Die GEUDER AG behält sich Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vor.
Für die Richtigkeit jeder einzelnen Angabe kann keine Gewähr übernommen werden.
Illustrationen nicht maßstabsgerecht.

GEUDER AG · Hertzstraße 4 · 69126 Heidelberg · Deutschland
Telefon: +49 6221 3066 · Fax: +49 6221 303122 · www.geuder.de

69305 / 500
OSGHGO

Geuder®
Precision made in Germany

Distributed by  **Medilas**

Medilas AG
Zürcherstrasse 39E / CH-8952 Schlieren
www.medilas.ch / info@medilas.ch / +41 44 747 40 00

ENDOTRON®532 – MAXIMALE FLEXIBILITÄT

IHRE ENTSCHEIDUNG: INTEGRIERTE BENUTZERFÜHRUNG ODER STAND-ALONE.



KOMBINIERTER MODUS

INTEGRIERTE BENUTZERFÜHRUNG


- Benutzerführung über den megaTRON S4^{HPS} Touchscreen
- Steuerung über den megaTRON S4^{HPS} Fußschalter
- Formschlüssige Platzierung auf dem megaTRON S4^{HPS}



STAND-ALONE MODUS

PERFEKTION FÜR IHRE OPERATION

- Touchscreen-Fernbedienung mit Bluetooth®-Anbindung
- Steuerung durch eigenständigen Laserfußschalter
- ocuLED-Anschluss zur Endoillumination

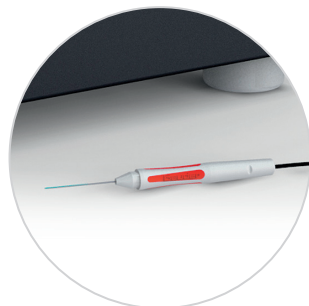

DAS ZUBEHÖR

HIGH-END UNO COLORLINE LASERFASERN FÜR IHRE OP

- Homogenes Strahlenbild
- Verfügbar in 20, 23 und 25 Gauge
- Unterschiedliche Geometrien: Gerade und gebogen
- Optionaler Spaltlampenadapter



GEUDER – PRÄZISION UND QUALITÄT

UNTERSTÜTZT IHR CHIRURGISCHES KÖNNEN

- Konvergente Lasertransmission
- Perfektes Temperaturmanagement für anspruchsvolle Operationen
- Ergonomische GEUDER Präzision

ENDOTRON®532 – MAXIMALE FLEXIBILITÄT

IHRE INDIVIDUALITÄT: GESPEICHERTE LASEREINSTELLUNGEN ERHÖHEN DIE PATIENTENSICHERHEIT.



IHRE OP – IHRE EINSTELLUNGEN

REPRODUZIEREN SIE IHR CHIRURGISCHES KÖNNEN

- Bis zu sechs Benutzerprofile speicherbar
- Lasereinstellungen sind sofort verfügbar



EINFACHE BEDIENUNG

PASSEND ZU IHREN ANFORDERUNGEN FREI PROGRAMMIERBAR

- Intensität: 50 mW bis 1.500 mW
- Pulsdauer: 50 ms bis 3.000 ms
- Pausendauer: 50 ms bis 3.000 ms



FLEXIBILITÄT FÜR IHRE OP

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE ZUBEHÖR

- Individuelle Aiming Beam Intensität
- Unterstützt unterschiedliche OP-Strategien
- Endokoagulation oder Behandlung mittels Spaltlampenadapter



PATIENTENSICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

ZUVERLÄSSIGE KOMPONENTEN FÜR HÖCHSTE PATIENTENSICHERHEIT

- Optimiertes Thermo-Management
- Reproduzierbarer Koagulationspunkt, scharf abgegrenzt und homogen
- Keine temperaturbedingten kornealen Nebenwirkungen